



Anti-GP210 mAb

产品信息

背景: 原发性胆汁胆管炎 (PBC) 是一种罕见的进行性肝内胆汁淤积性自身免疫疾病, 其特征是肝小胆管逐渐受到破坏, 可发展为肝硬化以及肝功能衰竭。抗 GP210 抗体是一种抗核抗体 (ANA), 其靶点是核孔复合物上的相对分子质量为 210,000 的跨膜蛋白, 抗 GP210 抗体对 PBC 的诊断特异性高到 99%, 如果患者出现抗核抗体以及抗 GP210 抗体为阳性, 多考虑患者有自身免疫性肝炎或者原发性胆汁淤积性肝炎。

物种特异性: 识别 GP210 蛋白

克隆类型: 单克隆抗体

IgG 类型: Fc 人源化

纯化方式: protein A

缓冲液: 0.01M PBS


储存温度: -20°C, 避免反复冻融

产品应用

名称	应用
Anti-GP210-137 mAb	校准品

案例展示

包被 200ng/ml 的 GP210 重组蛋白 (BP0107), 每孔 100 μ l; 一抗为 Anti-GP210-137 mAb, 二抗为羊抗人 IgG-HRP, 其结果如下:

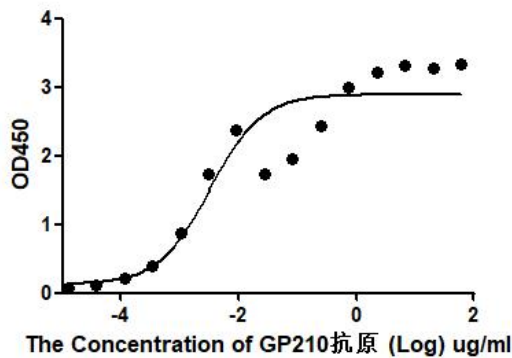

订购信息

名称	货号	规格
Anti-GP210-137 mAb	BP0080	1mg 及以上